

DHS

Kuru Isı Sterilizasyon Veri Kayıt Sistemi

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU

MadgeTech ürün yelpazesinin
tamamını görmek için
staconn.com adresindeki web
sitemizi ziyaret edin.



STACONN
— TEKNOLOJİ —

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU

Ürün Genel Bakışı

DHS Kuru Isı Sterilizasyonu Veri Kayıt Sistemi, aşağıdakilerle donatılmış hepsi bir arada bir pirojen giderme çözümüdür:

- HiTemp140-M12, Yüksek Sıcaklık Veri Kaydedici
- M12 konektörlü ve düz prob uçlu 36 inç Cam Örgülü RTD pirojen giderme probu
- ThermoVaultMax, Aşırı Sıcaklık Termal Bariyeri

Kurulum Kılavuzu

Yazılım Kurulumu

Yazılım, **Madgetech.com** adresindeki MadgeTech web sitesinden indirilebilir. Kurulum sihirbazında verilen talimatları izleyin.

Bağlantı İstasyonunun Kurulumu

IFC400 veya IFC406 (ayrı satılır) — Cihazı arayüz kablosuyla bir USB portuna bağlayın. Sürücüler otomatik olarak yüklenecektir.

Sipariş Bilgileri


- 900002-00 — DHS Veri Kayıt Sistemi

Not: Bu ürün 140 °C'ye (284 °F) kadar kullanım için derecelendirilmiştir. Lütfen pil uyarısına dikkat edin. Ürün, 140 °C'nin (284 °F) üzerindeki sıcaklıklara maruz kalırsa patlayacaktır.

Veri Kaydediciyi Isı Bariyerinden Çıkarma




1. Isı yalıtım bariyerinin kapağını sökün.

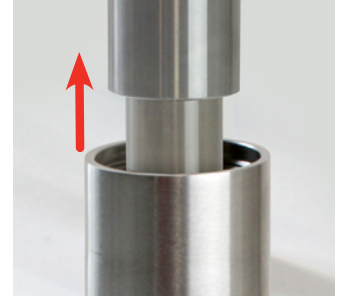

2. Veri kaydediciyi ve kapağı bariyer gövdesinden dışarı kaydırın.



3. HiTemp140-M12 veri kaydediciyi ısı yalıtım bariyerinin kapağından sökün.

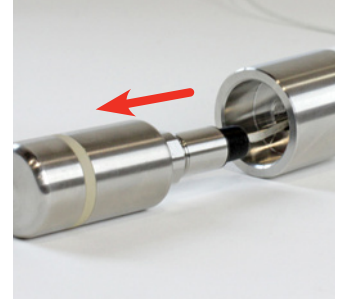

4. Veri kaydedicinin probunu ısı bariyerinin kapağından dışarı kaydırın.

ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU

Cihazın Çalışması

Veri Kaydediciyi Bağlama ve Başlatma

1. Yazılım yüklendikten ve çalışmaya başladıktan sonra, arayüz kablosunu yerleştirme istasyonuna takın.
2. Arayüz kablosunun USB ucunu bilgisayardaki boş bir USB portuna bağlayın.
3. Veri kaydediciyi yerleştirme istasyonuna yerleştirin.
4. Veri kaydedici, yazılım içindeki **Bağlı Cihazlar** altında otomatik olarak görünecektir.
5. Çoğu uygulama için, menü çubuğundan **Özel Başlat**'ı seçin ve veri kaydı uygulaması için uygun olan istenen başlatma yöntemini, okuma hızını ve diğer parametreleri seçin ve **Başlat'a** tıklayın. (**Hızlı Başlat**, en son özel başlatma seçeneklerini uygular, **Toplu Başlat**, aynı anda birden fazla kaydediciyi yönetmek için kullanılır, **Gerçek Zamanlı Başlat** , kaydediciye bağlıyken veri setini kaydeder.)
6. Başlatma yönteminize bağlı olarak, cihazın durumu **Çalışıyor**, **Başlatmayı Bekliyor** veya **Manuel Başlatmayı Bekliyor** değişecektir.
7. Veri kaydediciyi arayüz kablosundan ayırın ve ölçüm yapılacak ortama yerleştirin.

Not: Cihaz, hafıza sınırına ulaşıldığında veya cihaz durdurulduğunda veri kaydını durduracaktır. Bu noktada, cihaz bilgisayar tarafından yeniden etkinleştirilene kadar yeniden başlatılamaz.

Veri Kaydediciden Veri İndirme

1. Veri kaydediciyi yerleştirme istasyonuna yerleştirin.
2. **Bağlı Cihazlar** listesinde veri kaydediciyi seçin.
Menü çubuğundan **Durdur'a** tıklayın.
3. Veri kaydedici durdurulduktan sonra, kaydedici seçili haldeyken **İndir'e** tıklayın. Raporunuza bir ad vermeniz istenecektir.
4. İndirme işlemi, kaydedilen tüm verileri bilgisayarınıza aktaracak ve kaydedecektir.

Tetikleme Ayarları

Cihaz, yalnızca kullanıcı tarafından yapılandırılan tetikleme ayarlarına göre kayıt yapacak şekilde programlanabilir.

1. **Bağlı Cihazlar** panelinde, ayarları değiştirmek istediğiniz cihazı seçin.
2. **Cihaz** sekmesinde, **Bilgi** grubunda, **Özellikler'e** tıklayın. Kullanıcılar ayrıca cihaza sağ tıklayıp bağlam menüsünden **Özellikler'i** seçebilirler.
3. **Tetikleyici'ye** tıklayın ve **Tetikleyici** ayarlarını yapılandırın.

Tetikleyici biçimleri Pencere ve İki Nokta (çift seviyeli) modunda mevcuttur. Pencere modu, tek bir sıcaklık aralığı izlemeye olanak tanırken, iki nokta modu iki aralığa olanak tanır.

Şifreleme

Başkalarının cihazı başlatmasını, durdurmasını veya sıfırlamasını engellemek için cihazı parola ile korumak için:

1. **Bağlı Cihazlar** panelinde, istediğiniz cihaza tıklayın.
2. **Cihaz** sekmesinde, **Information** grubunda, **Özellikler'e** tıklayın. Veya, cihaza sağ tıklayın ve bağlam menüsünden **Özellikler'i** seçin.
3. **Genel** sekmesinde, **Parola Belirle'ye** tıklayın.
4. Görünen kutuya parolayı girin ve onaylayın, ardından **TAMAM** seçeneğini seçin.

Destek mi İstiyorsunuz?

Cihaz Bakımı

O-Ringler

HiTemp140-M12'nin doğru bakımı için O-ring bakımı çok önemlidir. O-ringler sıkı bir sızdırmazlık sağlar ve sıvının cihazın içine girmesini önler. O-ring arızasını önleme hakkında bilgi için lütfen madgetech.com adresinde bulunan "O-Ringler 101: Verilerinizi Koruma" uygulama notuna bakın.

Pil Değişimi

Materyal: ER14250MR-145 Pil

1. Veri kaydedicinin altındaki vidayı sökün ve pili çıkarın.
2. Yeni pili veri kaydediciye yerleştirin. Pilin kutuplarına dikkat edin. Pili pozitif kutup yukarı, proba doğru bakacak şekilde takmak önemlidir. Bunu yapmamak, ürünün çalışmamasına veya yüksek sıcaklıklara maruz kalması durumunda potansiyel patlamaya neden olabilir.
3. Kapağı veri kaydediciye geri vidalayın.



Yeniden kalibrasyon

MadgeTech yıllık kalibrasyon yapılmasını önermektedir. Cihazlarınızı kalibrasyon için geri göndermek üzere staconn.com adresini ziyaret edin.



Ürün Desteği ve Sorun Giderme

- Çevrimiçi Kaynak Kütüphanemizi staconn.com adresinden ziyaret edin.
- Müşteri Destek Ekibimizle +90 216 684 0585 numaralı telefondan veya destek@staconn.com adresinden iletişime geçin.



MadgeTech 4 Yazılım Desteği

- MadgeTech 4 Yazılımının yerleşik yardım bölümüne bakın.
- MadgeTech 4 Yazılım Kılavuzunu staconn.com adresinden indirin.
- Müşteri Destek Ekibimizle +90 216 684 0585 numaralı telefondan veya destek@staconn.com adresinden iletişime geçin.

STACONN
— TEKNOLOJİ —

Aydınlı Mah. Yanyol Cad., Melodi Sk.
No:2/58, 34956 Tuzla/İstanbul
+90 216 684 05 85
staconn.com
info@staconn.com.tr